



Polyoftalmica.new

strumenti per l'oftalmologia



- Senza anestesia
- Nessun contatto con la cornea
- Senza sterilizzazione
- Nessun rischio di infezioni
- Screening veloce
- Misura su pazienti con patologie corneali

LA MISURA DEL TONO SI FA SEMPLICE

TONOMETRO DIATON



TONOMETRO DIATON

È un tonometro portatile a penna che utilizza una rivoluzionaria metodologia di misura attraverso la palpebra. Viene fornito in un astuccio protettivo, che include un dispositivo per testare la calibrazione, e un DVD in italiano che illustra e spiega la metodologia di esame. Numerosi studi e ricerche di comparazione effettuati sul tonometro ad appianazione di Goldmann ne documentano l'affidabilità, nel rispetto delle indicazioni d'uso.

Approvato e registrato CE e FDA.

VANTAGGI TONOMETRIA TRANSPALPEBRALE

- Screening di massa.
- Misura della IOP in pazienti dopo chirurgie corneali.
- Controllo quotidiano del tono.
- Esame di pazienti disabili e di bambini.
- Misura della IOP in pazienti soggetti a patologie corneali.
- Misura semplice e veloce.
- Senza sterilizzazione o sostituzione delle sonde.
- Nessun anestesia e nessun rischio di infezioni.
- Misura su pazienti portatori di lenti a contatto

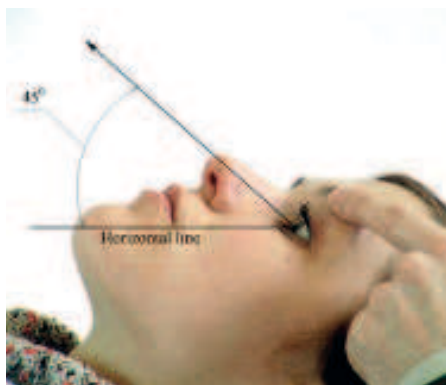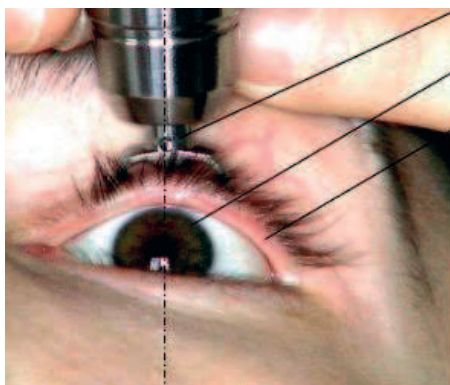

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di misurazione:	5-60 mm Hg
Margine di errore:	Da 5 a 20 mm Hg: + - 2 mm Hg Da 20 a 60 mm Hg: + - 10 %
Voltaggio Batteria:	3 V
Numero misurazioni con un set batteria:	1500 misure
Peso:	89 g
Dimensioni:	174 x 26 x 20
Numero di misure minimo per esame:	2 misure per ottenere la media

Referente di Zona: