
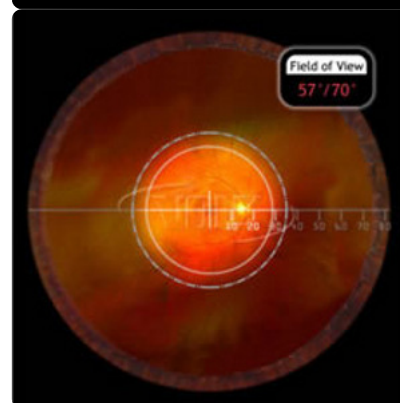


Volk

DIGITAL HIGH MAG

Lente non a contatto per Lampada a Fessura della serie "Digital", studiata per dare un'alta risoluzione e un ampio campo di scansione retinica. Le lenti della serie "Digital" sono la 3ª generazione delle lenti Volk, rispetto alle lenti classiche hanno il vantaggio di dare migliori risultati per le immagini digitali acquisite dalla Lampada a Fessura.

- Il vetro a bassa dispersione riduce l'aberrazione cromatica per un'immagine retinica.
- L'alto ingrandimento fornisce una visuale topografica dello strato fibroso del nervo ottico.
- L'eccezionale stereopsi consente l'individuazione di fluido sieroso maculare.
- Il rivestimento A/R ottimizzato, minimizza i riflessi e l'abbagliamento.

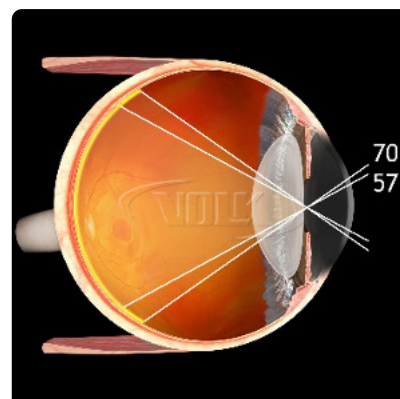

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 57° / 70°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.30x

SPOT LASER: 0.77x

DISTANZA OPERATIVA: 13mm

RIVESTIMENTI: UHE