


Volk

LASER SLT

Lente per gonioscopia, progettata per i trattamenti di Trabeculoplastica Laser Selettiva.

- L'ingrandimento 1.0x mantiene la dimensione e la densità di potenza dello spot laser.
- Il profilo del raggio laser resta circolare, per un posizionamento costante dello spot laser.
- Il contatto usato con fluido di accoppiamento assicura la stabilità dell'erogazione del Laser.
- L'ampia superficie internamente riflettente offre una visione eccellente dell'angolo.

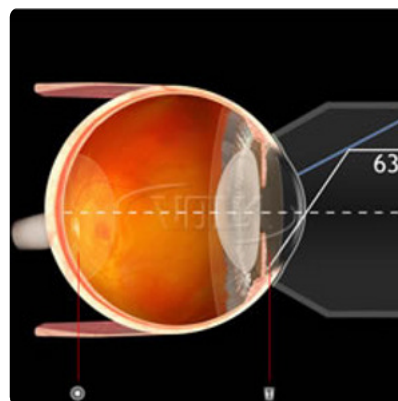

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 63°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.00x

SPOT LASER: 1.00x

RIVESTIMENTI: BROADBAND