


MOS-24

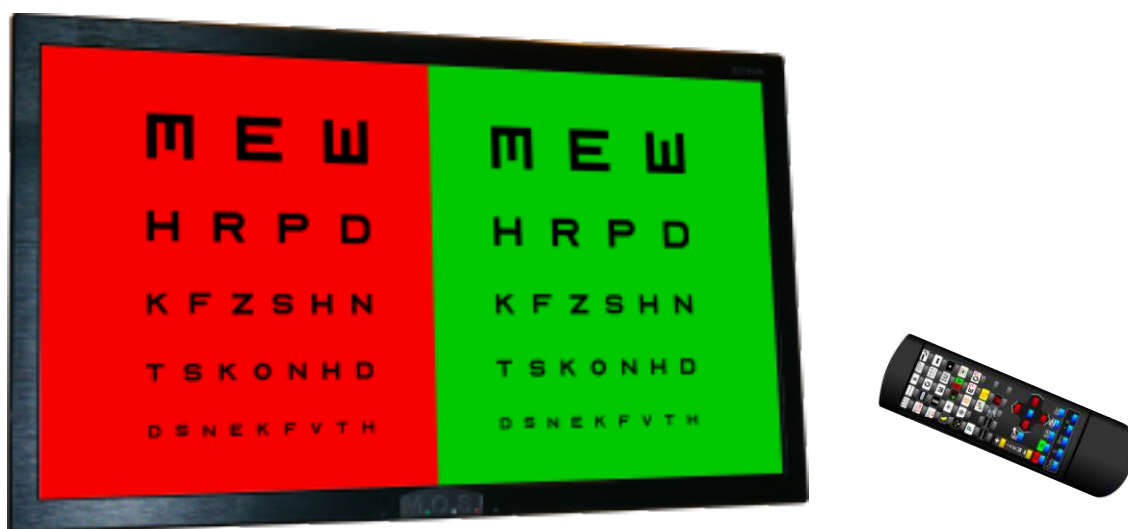

Un ottotipo computerizzato semplice ma completo perfetta sintesi fra precisi standard clinici e semplicità d'uso.

Tutti i test sono a disposizione tramite un semplice telecomando.

Il MOS è l'unico ottotipo a disporre di routine automatizzate per la misurazione dell'AV (metodo staircase) e della sensibilità al contrasto con calcolo statistico e rappresentazione grafica (limiti di confidenza e deviazione standard).

È predisposto per il collegamento alle luci di abbagliamento per i test per il rinnovo/concessione della patente di guida e nautica.

Con la sequenza impostata è possibile salvare un report per la stampa o l'archiviazione come file. Il MOSlight dispone di attacco per essere fissato a parete, su piantana, o su base da tavolo.

Sono inclusi i test per il rinnovo delle patenti secondo la recente normativa con scheda finale della valutazione e possibilità di stampa o esportazione su supporto USB del report finale

Scheda Tecnica

Monitor: 24"

Angolo visuale: 178° tecnologia IPS

Definizione monitor: 1920×1080 24bit

Contrasto monitor: sup. 1000:1

Luminosità massima: 250 (cd/m²)

Polyoftalmica New SRL – Via Albert Bruce Sabin, 5/C – 43100 Pilastrello di Parma (PR)
P.I. e C.F.: 02148950344 Reg.Imprese Parma: 02148950344/2000 R.E.A. 214571 Capitale soc. €. 15.000,00
Tel.0521/642126 Fax 0521/643941 Sito Internet: www.polynew.it e-mail: info@polynew.it



Superficie utile: 531×298 (mm)

Contrasto fotometrico massimo: sup. al 98%

Contrasto fotometrico minimo: inferiore all'1% +/- 1

Elettronica dedicata ad alta efficienza e basso consumo

Consumo totale massimo: 36W

Telecomando a IR

Alimentazione auto range: 110/230 V

Peso: 4.0Kg (senza piedistallo)

Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Occhialino anaglifico, Telecomando a pile, Manuale