




FRONTIFOCOMETRO DL-2000P

COD: RX-DL2000P

 **Rexxam**
Quality in Vision Care

Frontofocometro automatico computerizzato Rexam per l'analisi delle lenti monofocali, progressive, lenti a contatto ecc. Modello base DL-2000P con stampante, misura raggi uv, distanza PD e luce blu. I nuovi modelli DL-2000 si caratterizzano per un design innovativo e per la tecnologia LED verde con sensore Hartmann che fornisce estrema precisione e facilità di analisi delle lenti progressive.

- Stampante termica inclusa
- Misura filtraggio raggi UV inclusa
- Misura distanza interpupillare PD
- Misura trasmittenza luce blu
- **Monitor touch screen a colori reclinabile**
- LED verde: LETTURA DELLE PROGRESSIVE IMMEDIATA E SEMPLICISSIMA
- **Passaggio Occhio destro Occhio sinistro in automatico**
- Marcatura lenti con pennini sostituibili
- **Interfaciabile con Forottero automatico Rexam DR-900**

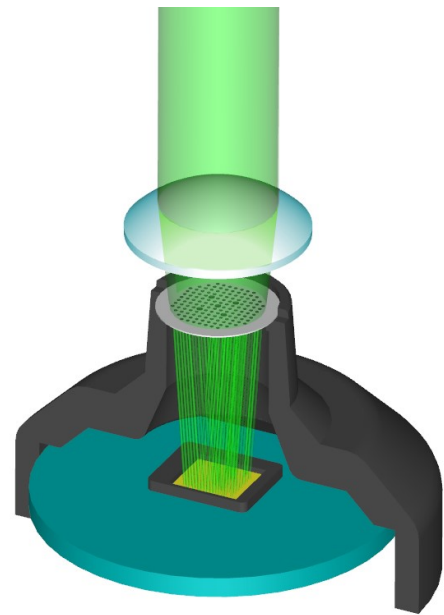

SCHEMA TECNICA:

DIAMETRO MASSIMO LENTI MISURABILI: 100mm

RANGE SFERA: -25D - +25D (0.01/0.12/0.25 step)

RANGE CILINDRO: -10D - +10D (0.01/0.12/0.25 step)

ASSE: 0° - 180°

ADDIZIONE: 0 - 10D (0.01/0.12/0.25 step)

PRISMI: 0- 15D orizzontali 0-20D verticali (0.01/0.12/0.25 step)

FILTRAGGIO UV: 0-100% (1/5/10 step) 375nm lunghezza d'onda

LUCE BLU: 0-100% (1/5/10 step) 420nm lunghezza d'onda

LUNGHEZZA D'ONDA DI MISURA: 525 nm

LENTI MISURABILI: Singole, multifocali, monofocali, progressive e su montature.

LENTI A CONTATTO: Morbide, Rigide e Semirigide (con apposito supporto)

ALIMENTAZIONE: AC 100-240V / 50/60Hz

MONITOR: Schermo LCD da 7"

STAMPANTE: Termica su carta

CONSUMO: 40VA

DIMENSIONI: L 195mm x P 209mm x A 447mm

PESO: 5 kg

ACCESSORI INCLUSI: Cavo alimentazione, Supporto lente a contatto, Copertina, Manuale d'uso in italiano, Carta stampante.