


LENTE 4 SPECCHI HIGH MAG. VG4



4x64°
MIRROR
ANGLES

1.5x
IMAGE
MAG

0.67x
LASER
SPOT MAG

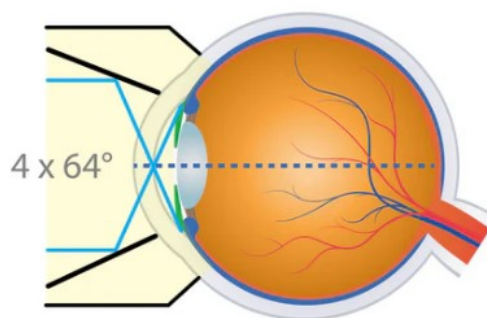

VOLK®

Lente Gonio a 4 specchi High Mag., aumenta del 50% l'ingrandimento dell'immagine del flusso trabecolare rispetto alla classica VG4. Con un'ottica superiore e un modello tipo Posner, si può facilmente effettuare gonioscopia statica o dinamica con la versione senza flangia e trabeculoplastica laser con la versione con flangia. Versione standard con anello grande (diametro 28.5mm) ma possibilità di avere anello piccolo (diametro 25.5mm).

- Versione con flangia garantisce stabilità durante trabeculoplastica
- Versione senza flangia ideale per gonioscopia statica e dinamica
- Disponibile in varie versioni: **CON FLANGIA (cod.VG4HM); SENZA FLANGIA ANELLO LARGO (cod.VG4HMLNF); SENZA FLANGIA ANELLO PICCOLO (cod.VG4HMSNF); CON MANICO STILE POSNER (cod.VG4HMHAN2).**

SCHEDA TECNICA

CAMPO VISIVO: 4x64°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.50x

SPOT LASER: 0.67x

DIAMETRO DI CONTATTO: 15mm (con flangia); 8.4mm (no flangia)